

Aiguille Sécurité


BD Vacutainer® Eclipse™ Signal™




avec indicateur
de retour
veineux




Recommandations d'utilisation

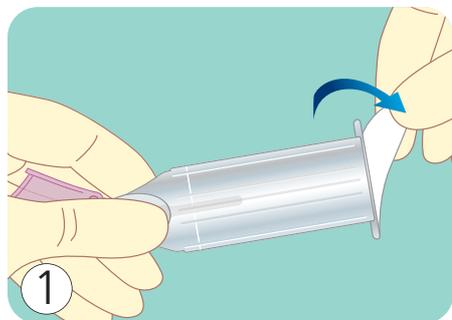


Retirer l'opercule de protection du corps.
Le dispositif est prêt à l'emploi.

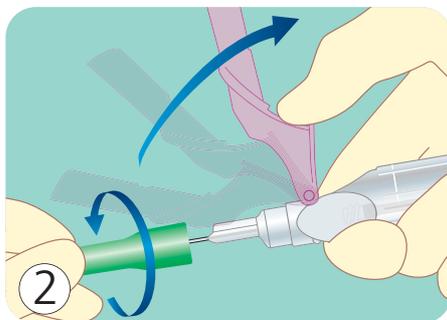


Rabattre la gaine de protection rose vers
l'arrière.
Dévisser le capuchon protecteur de couleur
et le retirer.

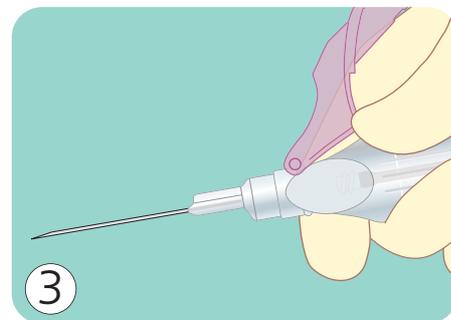


Le biseau de l'aiguille est aligné avec la
gaine de protection, en position adéquate
pour le prélèvement.
Ne pas faire tourner ou pivoter la gaine de
protection rose.

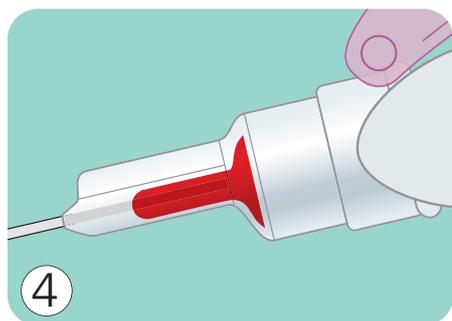

L'accès veineux est immédiatement confirmé
par la présence de sang dans la chambre de
visualisation.

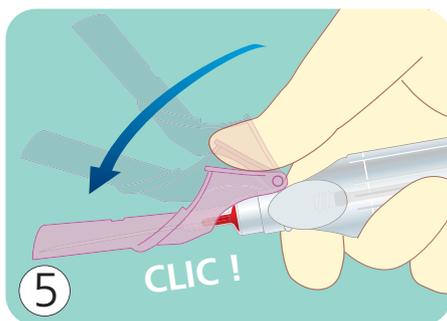

Dès le retrait de l'aiguille de la veine,
positionner fermement le pouce sur la zone
poussoir de la gaine de protection rose.
La repousser pour recouvrir l'aiguille jusqu'au
clic sonore.

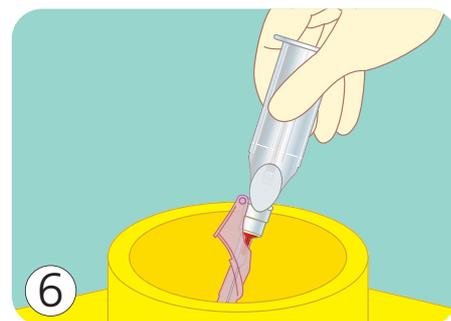

Immédiatement après l'activation de la gaine
de protection, éliminer le dispositif dans le
collecteur prévu à cet effet.

Références :

368835 (avec corps intégré) - Aiguille 21G (8/10), 32mm, verte

368836 (avec corps intégré) - Aiguille 22G (7/10), 32mm, noire