



**Consignes pour le recueil**

Le recueil s'effectue avant toute prise d'antibiotiques et si possible sans avoir uriné au cours des 4 heures précédant le recueil :

- **Avant le prélèvement**, se laver les mains et faire une **toilette locale intime** : Lavage à l'eau savonneuse et rinçage avec un antiseptique type Dakin du méat urinaire (et de la région vulvaire) d'un seul geste d'avant en arrière :
- Éliminer le 1<sup>er</sup> jet d'urines dans les toilettes et recueillir le **2<sup>e</sup> jet dans le flacon** stérile  
(Le flacon stérile ne doit être ouvert qu'au moment de prélèvement)
- Refermer le flacon.
- **Transférer** l'urine du pot vers les tubes sans ouvrir les tubes (voir mode d'emploi)
- Noter sur le flacon et les tubes fournis par le laboratoire : vos nom et prénom(s), date de naissance et date et heure de prélèvement

**Nourrissons** - Appliquer le sac collecteur (à acheter en pharmacie) au niveau de l'appareil génital du nourrisson après désinfection soigneuse de la vulve, du méat urinaire et du périnée ou du gland et du prépuce.

NB : Ne pas laisser le sac collecteur plus de 30 minutes, sinon recommencer avec une nouvelle poche.

- Noter sur la poche ses nom et prénom(s), date et heure du prélèvement et le mettre la poche dans un contenant stérile

**Délai d'acheminement au laboratoire** : Rapporter le pot et les 3 tubes bouchons Kaki, Rouge/Jaune et beige dans les meilleurs délais (Inférieur à 12h à température ambiante)



NB : le délai est réduit à moins de 2h à température ambiante (ou 12h au réfrigérateur) si les urines ne sont pas transférées dans les tubes.

**A compléter par le patient**

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Genre : H  F  ND

Date de naissance : --/--/----

Date et heure de prélèvement : --/--/---- à --h--

Étiquette Patient

Cet enregistrement est à scanner dans le système informatique du laboratoire

**Modalité du recueil :**

Laboratoire  Domicile (Délai conforme )

Si oui modalité de conservation :  Température ambiante < 2h  Frigo

Milieu de jet  Collecteur/Poche  Sonde

**Symptômes / Contexte :**

Absence de symptômes

Grossesse : Oui  Non

Acte urologie prévu Oui  Non  Date--/--/---

Contrôle après traitement Oui  Non

Symptômes

- Symptômes vésicaux : Brûlures mictionnelles, mictions fréquentes, sang dans les urines ou urines troubles
- Symptôme de PNA : Fièvre, frissons, douleurs lombaires ou abdominales
- Infections urinaires à répétition

Autres Symptômes

Traitement antibiotique  Non  Oui si oui lequel : .....




Recommandations d'utilisation



1  
Soulevez l'étiquette blanche et collez-la au bord du couvercle.  
**Transférez l'urine du pot vers les tubes dans les meilleurs délais.**



2  
Insérez le tube en poussant à fond.  
Attendez la fin du remplissage avant de retirer le tube.

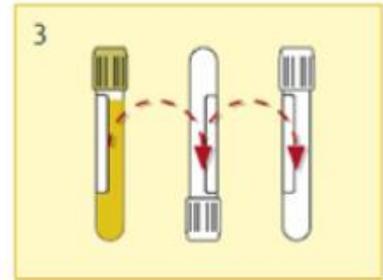


3  
Homogénéisez le tube par 8 à 10 retournements lents



4  
Replacer l'étiquette sur l'orifice du couvercle



5  
Identifiez l'échantillon.

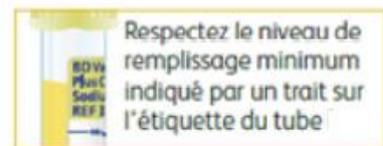

Respectez le niveau de remplissage minimum indiqué par un trait sur l'étiquette du tube